



Negatif Basıncı Yara Tedavisi



RX15



Hakkımızda

A.Z.M. Medikal ve Mühendislik sektörlerinde 1998 yılından beri deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir. Medikal sektörde uzmanlaşmış; medikal ürün geliştirme ve klinik uygulama geçmişi ile negatif basınçlı yara tedavi sistemleri konusunda aranan bir firma haline gelmiştir.

A.Z.M. Medikal, Avrupa normlarına uygun üretim süreçleri ve uzman kadrosu ile negatif basınçlı yara tedavisi uygulamalarında sağlık profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı ve hasta konforunu ön planda tutmayı amaç edinmiştir.

Negatif basınç yara sistemleri ile ilgili yenilik ve gelişmeleri yakından takip etmekte, AR-GE çalışmaları ile kaliteli ve teknolojik FAVA marka negatif basınç yara sistemlerini Türkiye ve Dünya piyasasına sunmaktadır.

Sağlık sektörünün sorumluluğunu taşıyan ve en iyi hizmeti en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalışan firmamız SATIŞ ve SONRASI hizmetlerde en kısa zamanda cevap verme özelliğini taşımaktadır.

A.Z.M. Medikal tüm operasyonları aşağıdaki temel çalışma prensipleri üzerine uygulamaktadır:

- Yeni ihtiyaçlara cevap veren sürekli araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek
- Hasta konforunu ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak
- Satış ve satış sonrası hizmetlerde eksiksiz ve zamanında geri dönüş sağlamak
- Klinik eğitim ve doğru tedavi uygulamalarına gerekli tüm desteği sağlamak

Neden Biz ?

- Çünkü aldığımız her karar müşteri memnuniyeti ve menfaatleri ön planda tutularak değerlendirilir.
- Çünkü yeniliklere ve çözüme odaklı, hızlı ve doğru sonuca ulaşmak için sorunlara müdahale eder, kalite ve güvenlikten taviz vermeden iş akışını sağlarız.
- Çünkü iş uygulamalarımızda KALİTE, GÜVENLİK, MEMNUNİYET önceliğimizdir.

FAVA NEGATİF BASINÇ YARA TEDAVİ SİSTEMİ NEDİR ?

Akut, travmatik ve kronik yara bölgesinin steril bir şekilde kapatılarak kontrollü ve yara yatağına homojen dağıtılmış negatif basınç uygulanması temeline dayanır. Bu sistemde, akıllı tedavi cihazı ile yara bölgesine kontrollü negatif basınç uygulanır.

Vakum Yardımlı Yara Tedavisinin Etkisi

Yara bölgesinde oluşturduğu kontrollü negatif basınç sayesinde enfeksiyon ve eksudayı uzaklaştırarak yaraların daha kısa sürede iyileşmesini sağlamaktadır. İyileşme süresini kısaltarak hastaların hastanede yatış süresini azaltarak aynı zamanda ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır.

FAVA Negatif Basınç Yara Tedavisi Yara Üzerinde;

* Yara Eksudasını	Uzaklaştırır
* Organik ve inorganik partikülleri	
* Hücre migrasyonunu ve yeni doku oluşumunu	Sağlar
* Lokal mikrosirkülasyonu	
* Yeni kapillerin oluşmasını	
* Yara bölgesinde sürekli olarak negatif basıncın devamını	
* Lokal ödemi	Azaltır
* Bakteri kolonizasyonunu	
* Yara yatağında hissedilen acıyı	

Avantajları

- Granülasyon doku oluşumu sağlar
- Lokal ödemi azaltır
- Bakteri sayısını azaltır
- İyileşme süresini kısaltır
- Tedavi maliyetini azaltır
- Hasta yatış süresini kısaltır

Endikasyonlar

- Bası ülserleri
- Diyabetik ülserler
- Venöz staz ülserler
- Subakut yaralar
- Greftler, flepler
- Abdominal yaralar
- Diğer postoperatif yaralar
- Enfekte yaralar

Kontrendikasyonlar

- Nekrotik dokulu yaralar
- Tedavi edilmemiş osteomyelit
- Açıktaki arterler veya venler
- İncelenmemiş fistüller



FAVA TOPIKAL NEGATİF BASINÇ YARA TEDAVİ CİHAZI RX15

Renkli Dokunmatik Ekranı Sayesinde Basit ve Hızlı Kullanım



- Aralıklı ve Devamlı Fonksiyon Modu Seçeneği
- Hasta Hareketini Kısıtlamayan Düşük Ağırlık
- Sessiz Çalışma Özelliği
- Şarj Edilebilir Lityum İyon Batarya
- Geçmişe Yönelik Alarm Kayıtları
- Cihazın Çalışması ile İlgili İstatistik Kayıtlar
- Profil ve Ayar Ekleme / Güncelleme

- Geliştirilmiş Sesli ve Görsel Alarm Seçenekleri
- Renkli Dokunmatik Ekran
- Mikro İşlemci Kontrol Desteği
- Tuş Kilidi Özelliği
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Kayıtların Bilgisayar Ortamına Aktarılması



FAVA VAKUM YARDIMLI SÜNGERLİ KAPAMA SETLERİ GENEL ÖZELLİKLERİ

Hidrofobik yapıya sahip olup yara yüzeyinin şeklini alacak ve yara boşluğunu dolduracak özelliğindedir.

Eksudalı, infekte ve kaviteli yaralarda, yara boşluğunu doldurarak kapamaya olanak tanımaktadır.

Sünger ne fibrin, ne de hücre atıklarıyla tıkanmamaktadır.

Set içerisindeki drepler, sağlıklı ciltte maserasyona neden olmayacak mikro hava geçişine izin vermekte ve negatif basınç tedavisi boyunca cilde güvenli şekilde tutunmaktadır.

Kontrollü Vakum Etkisi; sıvı fazlası, aşırı kurutucu etki yapmadan emilir. Yara ortamının rutubetini azaltır, mikroorganizmaların azalmasını, yaranın temiz kalmasını sağlar.

İstenilen şekilde kullanılabilmek için kesilebilir özelliğe sahiptir.

Yara yüzeyinde negatif basıncı ideal şekilde sağlayarak yara kanlanmasını artırma, enfekte yaralarda bakteri yükünü azaltma, temas yüzeyinde granülasyonu sağlayabilme özelliklerine sahiptir.

Büyük gözenekli köpük malzemesi sayesinde enfeksiyona uğramış yaraların temizlenmesini teşvik etmektedir.

Fiziksel Uyarı; Negatif basıncın homojen olarak yara yüzeyine uygulanması, kan dolaşımının lokal olarak artmasını sağlayarak, yara ve çevresinin kanla beslenmesini ve oksijen alımını artırır.

Sahip olduğu çapraz bağ sayesinde döküntü yapmaz, gereksiz parçaların yara yatağında kalmasını engelleyici özelliğe sahiptir.

Kapama seti yaradan kaldırıldıktan sonra yarada kapama partikülü kalma riskini minimuma indirmektedir.

Negatif basıncın tüm yara yüzeyine homojen dağılımını sağlar.



FAVA VAKUM YARDIMLI SÜNGERLİ KAPAMA SETLERİ

FAVA HOMECARE KAPAMA SETİ

FAVA Homecare Kapama Seti aşağıda yer alan setten oluşur:

- HC Büyük Kapama Seti
- * Homecare kapama seti; sünger, şeffaf yapışkanlı yara örtüsü (drep), bağlantı hortumu, cilt temizleme mendili, cetvel, çelik paslanmaz makas, gazlı bez, eldiven, örtü ve taşıma tepsisinden oluşmaktadır.
- * Set içeriğindeki yardımcı ekipmanlar ile hızlı, kolay ve başarılı uygulamalar sağlanmaktadır.

FAVA Homecare Kapama Seti




Homecare kapama seti kullanımı ile pansuman rahatlığı sağlamaktadır.

FAVA SİRAL SÜNGERLİ KAPAMA SETİ

FAVA Spiral Süngerli Kapama Seti aşağıda yer alan setlerden oluşur:

- Vakum Yardımlı Spiral Süngerli Büyük Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Spiral Süngerli Orta Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Spiral Süngerli Küçük Kapama Seti

FAVA Spiral Süngerli Kapama Seti

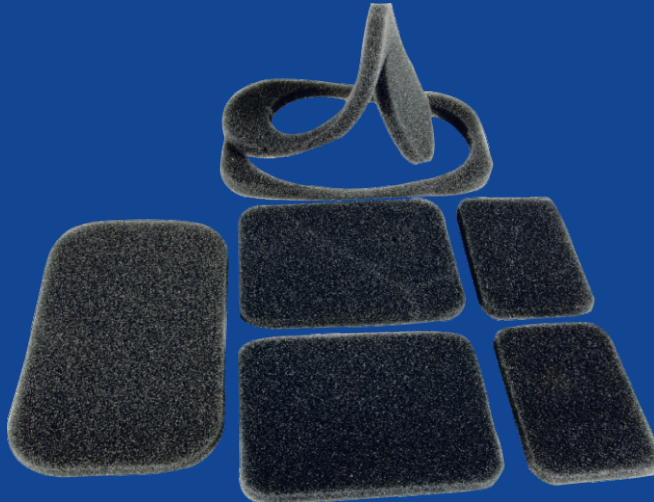

FAVA Spiral Süngerli Kapama Seti içeriğinde iki katlı spiral sünger bulunmaktadır.



FAVA SİYAH SÜNGERLİ KAPAMA SETİ

FAVA Siyah Süngerli Kapama Seti aşağıda yer alan setlerden oluşur:

- Vakum Yardımlı Siyah Süngerli Büyük Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Siyah Süngerli Orta Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Siyah Süngerli Küçük Kapama Seti

FAVA Siyah Süngerli Kapama Seti



FAVA Siyah Süngerli Kapama Seti derin yara uygulamaları için 3,3 cm kalınlığa sahiptir.

FAVA GÜMÜŞLÜ SÜNGER KAPAMA SETİ

FAVA Gümüşlü Sünger Kapama Seti aşağıda yer alan setlerden oluşur:

- Vakum Yardımlı Gümüşlü Sünger Büyük Kapama Seti
 - Vakum Yardımlı Gümüşlü Sünger Orta Kapama Seti
 - Vakum Yardımlı Gümüşlü Sünger Küçük Kapama Seti
- * Geniş spektrumlu antibakteriyel bir ajan olan gümüş içermektedir.
 - * Gümüşlü Süngerin tek başına kullanımı, ek bir gümüşlü ürün kullanımı gerekliliğini ortadan kaldırır.

FAVA Gümüşlü Sünger Kapama Seti



Antimikrobiyel madde olarak gümüş nano parçacıkları sünger üretimi esnasında entegre edilmiştir.

FAVA GÜMÜŞLÜ SİRAL SÜNGERLİ KAPAMA SETİ

FAVA Gümüşlü Spiral Süngerli Kapama Seti aşağıda yer alan setten oluşur:

- Vakum Yardımlı Gümüşlü Spiral Süngerli Büyük Kapama Seti

FAVA Gümüşlü Spiral Süngerli Kapama Seti



FAVA Gümüşlü Spiral Süngerli Kapama Seti içeriğinde iki katlı spiral sünger bulunmaktadır.

Kanıtlanmış Etkili ve Güvenli Kullanım Patentli Gümüş Teknolojisi

- ISO 10993 Biyouyumluluk;
- Agar Difüzyon Testi
- L929 MEM Elüsyon Testi
- İntrakutanöz Enjeksiyon Testi
- Kligman Maksimizasyon Testi



FAVA BEYAZ İNCE SÜNGERLİ KAPAMA SETİ

FAVA Beyaz İnce Süngerli Kapama Seti aşağıda yer alan setlerden oluşur:

- Vakum Yardımlı Beyaz İnce Süngerli Büyük Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Beyaz İnce Süngerli Orta Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Beyaz İnce Süngerli Küçük Kapama Seti

FAVA Beyaz İnce Süngerli Kapama Seti




FAVA Beyaz İnce Süngerli Kapama Seti eksuda hareketinin görülmesine olanak sağlarken, derin olmayan yüzeysel yara uygulamaları için 1,6 cm kalınlığa sahiptir.

FAVA YEŞİL SÜNGERLİ KAPAMA SETİ

FAVA Yeşil Süngerli Kapama Seti aşağıda yer alan setlerden oluşur:

- Vakum Yardımlı Yeşil Süngerli Büyük Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Yeşil Süngerli Orta Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Yeşil Süngerli Küçük Kapama Seti

FAVA Yeşil Süngerli Kapama Seti

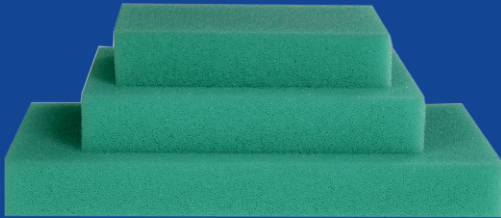

FAVA Yeşil Süngerli Kapama Seti eksuda hareketinin görülmesine olanak sağlarken derin yara uygulamaları için 3,3 cm kalınlığa sahiptir.



FAVA SİYAH İNCE SÜNGERLİ KAPAMA SETİ

FAVA Siyah İnce Süngerli Kapama Seti aşağıda yer alan setlerden oluşur:

- Vakum Yardımlı Siyah İnce Süngerli Büyük Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Siyah İnce Süngerli Orta Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Siyah İnce Süngerli Küçük Kapama Seti

FAVA Siyah İnce Süngerli Kapama Seti



FAVA Siyah İnce Süngerli Kapama Seti derin olmayan yüzeysel yara uygulamaları için 1,6 cm kalınlığa sahiptir.

FAVA VAKUM YARDIMLI SPANÇLI KAPAMA SETLERİ

FAVA SPANÇLI KAPAMA SETİ

FAVA Spançlı Kapama Seti aşağıda yer alan setlerden oluşur:

- Vakum Yardımlı Spançlı Büyük Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Spançlı Orta Kapama Seti
- Vakum Yardımlı Spançlı Küçük Kapama Seti

- * Negatif basıncın tüm yara yüzeyine homojen dağılımını sağlar.
- * Yara yüzeyinin şeklini alacak ve yara boşluğunu dolduracak özelliktedir.
- * Yaraya uygulama kolaylığı sayesinde pansuman süresini kısaltarak uygulayıcı ve hasta için kolaylık sağlar.
- * Spanç içindeki PHMB'nin antimikrobiyel aktivitesi yara bölgesindeki bakteriyel kolonizasyona karşı koymaya ve bakteriyel penetrasyonu önlemeye yardımcı olur.
- * Bariyer fonksiyonu kısmi ve tam kalınlıkta yaralarda enfeksiyonları azaltmaya yardımcıdır.

FAVA Spançlı Kapama Seti



PHMB içeren spançlı kapama seti pansuman içindeki bakterileri öldürür ve pansumanın bariyer özellikleri enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olur.





FAVA VAKUM YARDIMLI SÜNGERLİ VE SPANÇLI ABDOMİNAL KAPAMA SETLERİ

FAVA Abdominal Kapama Setleri aşağıda yer alan setlerden oluşur:

- **Vakum Yardımlı Spançlı Abdominal Kapama Seti**

Spançlı Abdominal Kapama Seti içeriğinde PHMB emdirilmiş spanç bulunmaktadır.



- **Vakum Yardımlı Süngerli Abdominal Kapama Seti**

Süngerli Abdominal Kapama Seti içeriğinde hidrofobik özellikteki sünger bulunmaktadır.



* Fava abdominal kapama seti ve Fava spançlı abdominal kapama seti açıkta kalan organlara bariyer teşkil etmesi ve kapama donanımının konulduğu bölgede sabit kalmasını sağlamak amacıyla, yapışmayan temas tabakasına sahiptir.



FAVA TOPLAMA SETİ

Toplama kabı içerisinde, sıvıları jelleştirerek köpürmesini ve hareket etmelerini engelleyecek sodyum poliakrilit (izolizer) bulunmaktadır.

- * Toplama kabı içerisinde koku ve sızıntıyı engellemek için hidrofobik bakteri ve koku engelleyici filtre bulunmaktadır.
- * Filtre; kontaminasyon riskini engelleyecek şekilde bakteriyel bir filtre ile aerosoller tutabilecek şekilde tasarlanmıştır.



Toplama Kabı
(500 cc)



Toplama Kabı
(300 cc)

- * Vakum yardımlı toplama seti içindeki bağlantı hortumu istenildiğinde birden fazla kapama setinin bağlanabilmesini sağlayabilecek parçaların takılmasına uygundur.



Y - Konnektör



Loer Lock Kilit Sistemi



- * Setler içerisindeki drepler, sağlıklı ciltte maserasyona neden olmayacak mikro hava geçişine izin vermekte ve negatif basınç tedavisi boyunca cilde güvenli şekilde tutunmaktadır.
- * Sıvı geçişini sağlayan hortum, drenajın bozulmasına neden olmayacak şekilde bükülmelere ve kırılmalara karşı dirençli olup negatif basıncı yaraya aynen yansıtacak ve taşıyacak niteliktedir.





Negatif Basınç Yara Tedavisi



Oğuzlar Mahallesi 1392. Sokak No:7/1
Balgat - Çankaya - Ankara / TÜRKİYE



0312 284 80 30 FAX: 0312 284 80 29



www.fava.com.tr - info@fava.com.tr

